


**Manual de instrucțiuni
pentru scaunul de masaj
MA2607**



Cuprins

Măsuri de siguranță	1-4
Afișaj de funcții	5-9
1. Structura	5
2. Control manual	6
3. Descrierea butoanelor manuale de control	6
4. Instalare	7-9
Scurtături de tastatură / Specificații tehnice	10-11
Instalarea scaunului de masaj	12-14
(1) Alegerea locației	12
(2) Modul de a deplasa scaunul	13
(3) Despachetarea scaunului de masaj	14
(4) Metode de întreținere	14
Depanare	15
Control vocal	16

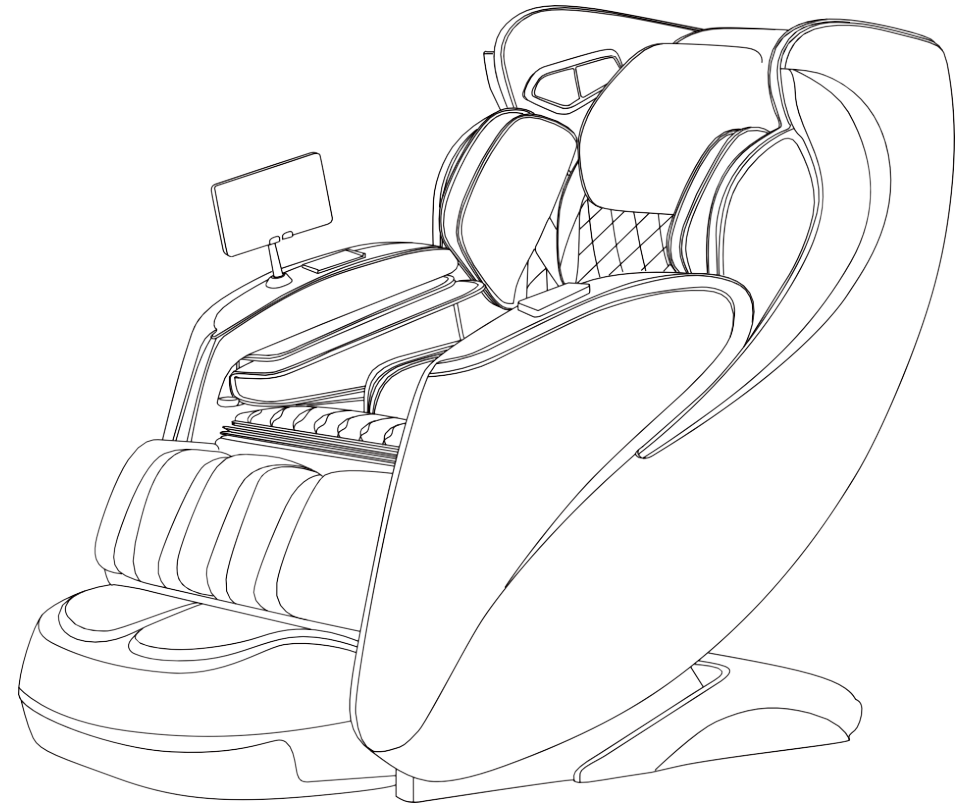

Control vocal

Control vocal

CONTROL VOCAL



	Comandă vocală	Răspuns
1	Hi Massage Chair	Hi
2	Start Massage	OK
3	End Massage	OK
4	Increase Massage	OK
5	Reduce Massage	OK
6	Start Mode One	OK
7	Start Mode Two	OK
8	Start Mode Three	OK
9	Start Mode Four	OK
10	Start Mode Five	OK
11	Start Mode Six	OK
12	Start Heat	OK
13	End Heat	OK
14	Increase Air	OK
15	Reduce Air	OK
16	Start Foot	OK
17	End Foot	OK
18	Back Rise	OK
19	Back Down	OK
20	Back Stop	OK
21	Start Air	OK
22	End Air	OK
23	Start Zero	OK
24	End Zero	OK

Măsuri de siguranță




Măsuri de siguranță



- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de utilizare și să folosiți acest produs corect.
- Precauțiile din această secțiune oferă instrucțiuni pentru utilizarea sigură și corectă a produsului, pentru a evita posibilele daune sau vătămări ale produsului, utilizatorilor și altora.
- Aceste notificări sunt marcate cu două simboluri de avertizare și avertizare care indică amploarea și severitatea potențialelor daune sau leziuni cauzate de operarea necorespunzătoare. Conținutul relevant pentru securitate este de o importanță crucială; Vă rugăm să le respectați.

 ATENȚIE	O operare incorectă poate duce la răni grave pentru utilizator.
 ATENȚIE	O operare incorectă poate duce la leziuni pentru utilizator și daune materiale. Pagubele materiale includ daune la locuințe, proprietăți, animale domestice, animale de companie și alte obiecte.

[Exemplu]

	Acest semn este un semn de avertizare sau de precauție. (Imaginea din stânga este folosită frecvent pentru avertismente sau avertismente.)
	Imaginea prezintă o descriere detaliată a conținutului interzis. (Imaginea din stânga arată că demontarea este interzisă.)
	Acest logo servește pentru a evidenția conținutul obligatoriu sau necesar.

ATENȚIE

Dacă aparatul nu funcționează corect, vă rugăm să deconectați imediat curentul.

- Asigură-te că nu există niciun pericol și apoi contactează dealerul pentru reparație. Reparațiile independente sunt strict interzise pentru a evita pericolul.
- Pătrunderea apei în interiorul dispozitivului. Obiecte străine care cad în interiorul dispozitivului.
- Șocuri severe, căderi sau daune ale carcasei.

ATENȚIE

- Dacă resimțiți orice disconfort fizic în timpul utilizării, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Acest produs ar trebui folosit pentru a preveni accidentările pe o suprafață plată.
- Înainte de a folosi acest produs, asigură-te că butonul de pornire funcționează corect pentru a evita accidentările.



Trebuie urmat întocmai

Măsuri de siguranță

Măsuri de siguranță








ATENȚIE

 INTERZIS	Utilizarea nu este permisă următoarelor persoane: Persoanele cu tromboză (boala cheagurilor de sânge, anevrism sever, anevrism venos acut), diverse boli ale pielii sau infecții cutanate (inclusiv inflamație a țesutului subcutanat) etc.
 Must be followed	Înainte de a folosi scaunul de masaj, următoarele persoane ar trebui să consulte un medic: 1. Pacienții predispuși la interferențe electromagnetice și care poartă dispozitive medicale implantate. Pacienți cu tumori maligne. 2. Pacienți cu boli de inimă. 3. Femeile în timpul sarcinii sau menstruației. 4. Pacienți cu diabet și tulburări circulatorii periferice. 5. Persoane cu tulburări perceptuale. 6. Pacienți cu leziuni în zona de masaj. 7. Pacienții cu febră și o temperatură corporală peste 38 °C, de exemplu în cazul unei inflamații acute (tifos, hipertensiune arterială). 8. Pacienți cu boli grave și slăbiciune fizică. 9. Pacienți cu fracturi osoase și dureri osoase acute. 10. Pacienți cu întinderi musculare și inflamație musculară. 11. Dacă suprafața dispozitivului se încălzește și sensibilitatea la căldură este limitată, trebuie să fie atentă la utilizare. 12. În plus, persoanele cu stări generale precare, disconfort sau nevoie de odihnă ar trebui să folosească scaunul de masaj doar cu prudență. Acest produs are un program de masaj care durează 15 minute pe ciclu. Vă rugăm să evitați masajul continuu a aceleiași zone.



ATENȚIE

 Nu țineți mâinile	Nu folosiți niciodată dispozitivul când corpul este umed pentru a evita accidentele sau defecțiunile cauzate de șocuri electrice.
 Evitați umezeala, evitați defecțiunile mecanice	Acest produs nu trebuie scufundat în apă sau alte lichide, nici nu trebuie folosit sau depozitat în medii umede, cum ar fi băile, pentru a evita accidentele cauzate de șocuri electrice sau defecte mecanice.
 Măsur.	Nu folosiți dispozitivul până nu vă asigurați că nu sunt persoane sau animale de companie în apropiere.
 Interzicerea demontării	Este strict interzis să se demonteze sau să repare acest produs, precum și cablurile de alimentare, comenzile și alte componente pentru a evita șocurile electrice, incendiile sau defecțiunile dispozitivului.
 Interzis	Nu folosiți cabluri de alimentare deteriorate. Nu îndoaia, nu trage, răsuci sau încurca forțat cablul de alimentare sau nu-l deteriora. Evitați scurtcircuitul și pericolul de incendiu cauzate de cablul de rețea. Nu atârnați obiecte grele pe el.

Depanare

Depanare



Probleme comune și soluții

Dacă neregulile continuă să apară după verificarea următoare, vă rugăm să încetați imediat folosirea aparatului și să-l deconectați de la priză pentru a evita accidentele. În același timp, contactează retailerul de unde ai cumpărat dispozitivul sau un centru de service din apropierea ta.

Starea	Motive și remedii
Acestea apar inevitabil în timpul construcției, nu sunt anomalii. Înfîințarea	Zgomotul de frecare dintre roata de masaj și material în timpul procesului de frământare Sunetul mișcărilor de ridicare și frământare ale roții de masaj Sunetul masajului cu presiune a aerului Sunetul pompei de umflare Sunetul de eliberare al airbagurilor Sunetul înclinării și ridicării spătarului scaunului

Dacă se detectează nereguli după inspecție, vă rugăm să încetați imediat folosirea.

Roata de masaj se oprește și ea între timpul masajului.	Dacă se aplică prea multă presiune pe roata de masaj, aceasta se va opri. Vă rugăm să ridicați ușor corpul sau să înclinați ușor spătarul scaunului pe spate în timp ce folosiți dispozitivul. (Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele care cântăresc peste 100 kg; vă rugăm să țineți cont de acest aspect când îl folosiți.)
---	---

După apăsarea butonului de la telecomandă, dispozitivul tot nu funcționează normal sau nu se poate conecta.	Vă rugăm să efectuați următoarele verificări: 1. Priza de alimentare este complet conectată la priză? 2. Este întrerupătorul principal de pe spatele dispozitivului pornit?
---	---

Cablul de alimentare și priza sunt neobișnuit de fierbinți.	Te rog să încetezi să-l folosești imediat.
---	--

Vă rugăm să discutați acest lucru cu dealerul dumneavoastră sau cu centrul de servicii pentru clienți.

Nu permiteți personalului neautorizat să demonteze sau să repare dispozitivul.




Instalarea scaunului de masaj


Instalarea scaunului de masaj

Despachetarea scaunului de masaj

Ridică cutia exterioră în sus, scoate coloana de montare și scoate cablul de alimentare și celelalte accesorii conform manualului de utilizare.

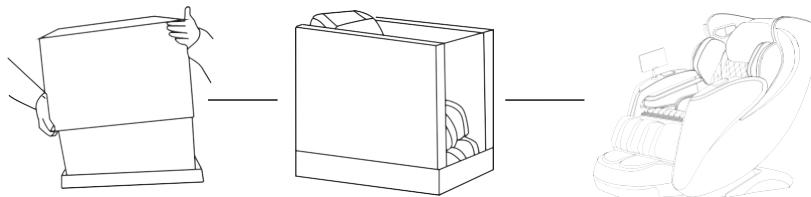

După ce despachetezi cutia, vei găsi întrerupătorul principal la baza spătarului scaunului de masaj. Conectează cablul de alimentare, pornește întrerupătorul și scaunul de masaj este gata de folosit.

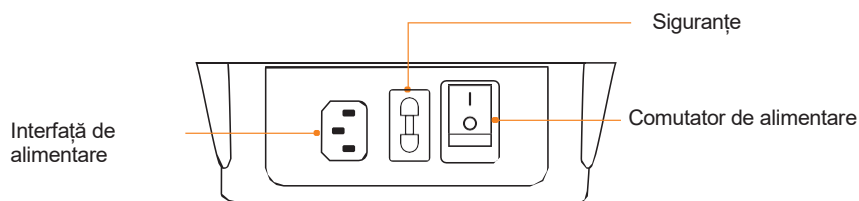

După ce instalarea accesoriului este finalizată, conectați priza de alimentare în priza de 220V, pornește butonul de pornire și activează controlul manual pentru a folosi dispozitivul.

Metode de întreținere

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a îndepărta murdăria din piele și piese din plastic:

1. Oprește aparatul și scoate-l din priză.
2. Înmoaie o cârpă moale și uscată în apă sau apă caldă cu detergent neutru 3-5% și apoi storce-o bine.
3. Șterge murdăria de pe suprafețele de piele și plastic.
4. Șterge cu o cârpă uscată.
5. Lasă dispozitivul să se usuce la aer.

Note importante:

Nu folosiți substanțe chimice precum alcool, diluant, benzină etc. pentru curățare.

Nu folosi un uscător de păr pentru a usca suprafața. Nu călca materialul produsului.

Efectuează întreținere doar când priza este scoasă din priză și asigură-te că mâinile tale sunt uscate. În caz de neutilizare prelungită, vă rugăm să folosiți o husă antipraf (care nu este inclusă) pentru a preveni acumularea de praf.



Măsuri de siguranță

Măsuri de siguranță



ATENȚIE

Scaunul de masaj își schimbă automat unghiul în timpul programului automat și este interzis să se apropie de crăpături sau deschideri pentru a evita accidentările.

Nu folosiți surse de alimentare în afară de 220 V AC. Cablul de alimentare nu trebuie înfășurat în jurul produsului în timpul utilizării pentru a evita șocurile electrice, scurtcircuiturile sau incendiile.

Nu permiteți copiilor să se plimbe sau să se joace pe acest produs pentru a evita accidentarea sau defecțiunile dispozitivului.



Interzis

Când ajustezi înălțimea spătarului și a șezutului, precum și a picioarelor, asigură-te că nu există persoane, animale de companie sau obiecte în spatele sau sub masajul pentru picioare. În timpul procesului de ajustare, nu plasați nicio parte a corpului, inclusiv mâinile și picioarele, în spațiile dintre spătar și scaun, spătar și cotiere, cotiere și cotiere, precum și husele sub șa și cotierele pentru a evita accidentările.

Nu folosiți acest produs pe pielea goală pentru a evita leziunile pielii.

Vă rugăm să vă asigurați că folosiți acest produs conform utilizării intenționate descrise în acest ghid și să nu vă așezați direct pe picioare sau cotiere pentru a evita accidentările sau accidente.

Dacă orteza corporală este deschisă sau deteriorată, nu trebuie folosită pentru a preveni rănilor sau accidente.



ATENȚIE

Când nu este folosit sau după utilizare, vă rugăm să opriți imediat întrerupătorul de alimentare și să-l deconectați pentru a evita scurgeri, pene de curent sau incendii la reconectare. Dacă nu îl folosești pentru mult timp, te rugăm să oprești întrerupătorul principal de alimentare.



Nu atinge priza, priza sau cablul de alimentare cu mâinile ude pentru a evita șocul electric.



Când cureți și faci ordine, ar trebui neapărat să oprești întrerupătorul de alimentare și să-l deconectezi de la priză pentru a evita incendiile sau șocurile electrice. Când scoți priza de alimentare, nu trage forțat de cablul de alimentare, ci atinge priza pentru a preveni accidente.



Interzicere

Nu folosiți acest produs imediat după mese sau după consumul de alcool pentru a evita disconfortul. Obiectele grele nu trebuie agățate de cablul de alimentare sau ghidul de control, iar comanda manuală nu trebuie supusă șocurilor sau căderii din cauza forțelor externe pentru a evita funcționarea defectuoasă, defecțiunile, șocurile electrice sau incendiile. Nu fuma în timpul utilizării pentru a evita riscul de incendiu.



Măsuri de siguranță

Măsuri de siguranță



ATENȚIE

Nu trageți sau zgâriați cu forță materialul cu cuțite sau obiecte dure și ascuțite pentru a evita rănilile sau accidentele.

Nu vă îndoiți sau trageți forțat de cablul de alimentare sau de la telecomandă pentru a evita defecțiunile mașinilor sau incendiile.


Telecomanda nu trebuie expusă la șocuri sau căderi pentru a evita erori de funcționare sau defecte ale mașinii.

Dacă cablul de alimentare sau priza este deteriorată sau priza este slăbită, nu folosiți acest produs pentru a preveni șocurile electrice, scurtcircuitul sau incendiile.

Când ridici sau cobori picioarele, nu pune degetele în spațiile dintre ele pentru a evita accidentările. Nu folosiți forță asupra componentelor în timpul mișcărilor pentru a evita accidentările sau defectele mașinii.

Nu folosiți dispozitivul în timpul somnului; Utilizarea inconștientă poate duc la accidentări și disconfort fizic.

Nu trageți aparatul pe podele de lemn, covoare sau suprafețe ușor zgâriate. După mutare, poziționați cu grijă dispozitivul pentru a evita zgârieturile pe re podea.

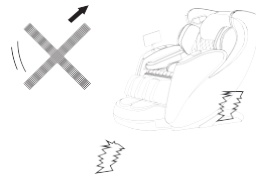

ATENȚIE

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Pături sau alte huse nu trebuie folosite pentru a acoperi unitatea.

Asigură-te că priza și priză sunt în stare perfectă și nu au murdărie.

Nu urca pe dispozitiv, nu călca pe el și nu stivuiești obiecte grele pe el pentru a evita rănirea sau defecțiunea dispozitivului.

Nu folosiți acest produs în apropierea surselor de incendiu sau a materialelor inflamabile pentru a evita deformarea produsului, defecțiunile echipamentelor sau accidente de incendiu.

Nu folosiți acest produs în medii cu concentrații ridicate de substanțe chimice volatile, cum ar fi petrolul și gazele.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități mintale să se apropie de dispozitiv în timpul utilizării pentru a evita accidentările.

Nu folosiți solvenți organici, alcool sau insecticide pentru a șterge sau pulveriza acest produs.




Instalarea scaunului de masaj

Instalarea scaunului de masaj



Mutarea scaunului de masaj

1. Înainte de a muta scaunul, oprește butonul de pornire și deconectează-l de la priză.
2. Mai întâi, apasă pe spătarul scaunului astfel încât roțile din spate să atingă solul, apoi mișcă-l.
3. Pentru a evita deteriorarea podelei, vă rugăm să plasați o saltea sau alt obiect sub scaunul de masaj înainte de a-l muta.

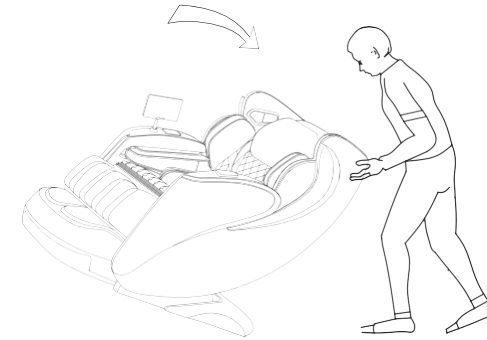

ATENȚIE

Dacă lățimea pasajului este mai mică de 90 cm, scaunul de masaj nu poate fi mutat normal.

Dacă scaunul de masaj nu poate fi mutat normal, vă rugăm să contactați retailerul de unde l-ați cumpărat.

Din cauza greutatei scaunului de masaj, vă rugăm să fiți atenți în timpul transportului și să evitați căderea.

Nu muta scaunul de masaj cât timp sunt oameni pe el. Înainte de a muta scaunul de masaj, scoate-l din priză.




Instalarea scaunului de masaj

Instalarea scaunului de masaj

Alegerea locației

Vă rugăm să vă asigurați că există o distanță de 50 cm în fața scaunului de masaj și în spatele acestuia

Există o distanță de cel puțin 80 cm pentru a evita ca scaunul de masaj să atingă pereții sau alte obiecte atunci când se înclină.

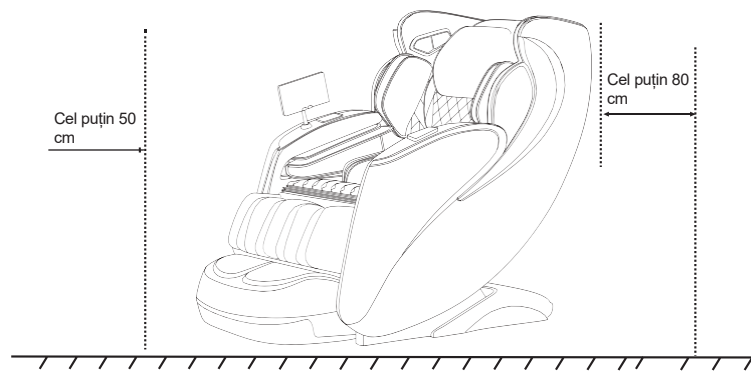

⚠️ Atenție

Nu folosiți în zone umede, cum ar fi băile sau saunele. Vă rugăm să așezați acest dispozitiv pe o suprafață plată și antiderapantă.
Nu folosiți în zone cu murdărie, praf sau temperaturi ambientale ridicate (peste 40°C).
Nu plasați acest dispozitiv în lumina directă a soarelui sau aproape de surse de căldură, cum ar fi încălzitoarele.
Ține flăcările deschise, cum ar fi țigările, departe de scaunul de masaj.


Afișaj de funcții

Afișaj de funcții




Structura aspectului

Acest dispozitiv are o funcție automată de detectare a corpului.
Te rog să te relaxezi și să te întinzi când pornești dispozitivul!

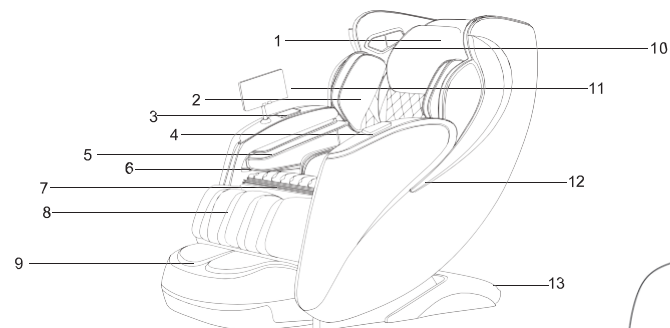

1. Tetieră
2. Clemă de umăr
3. Încărcător wireless
4. Taste apide
5. Airbaguri de braț
6. Control de sănătate
7. Perne pentru șezut

8. Airbaguri picioare
9. Masaj talpi
10. Capac difuzor
11. Control manual
12. Lumina ambientală
13. Baza

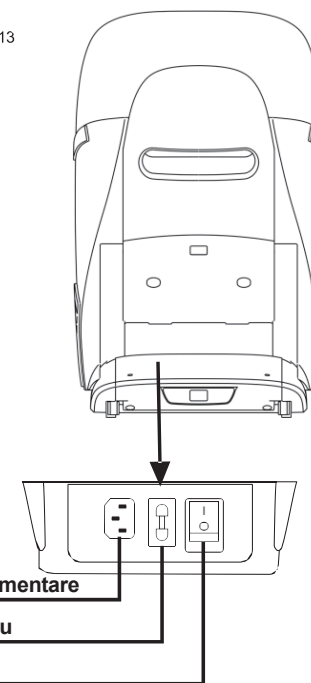

Conexiunea cablului de alimentare

Comutator de alimentare cu

Siguranță de putere



Afișaj de funcții

Afișaj de funcții

Scurtături de tastatură / Specificații tehnice

Scurtături de tastatură / Specificații tehnice




Control manual



Date tehnice

Model de produs	MA2607
Tensiune nominală	110-240V
Frecvență nominală	50Hz
Putere nominală	150W
Funcționare	Standard 15 minute, reglabil la 10, 15, 20, 25 sau 30 de minute
Clasa de securitate	Clasa 1
Dimensiunea pachetului	126×77×124cm

Descrierea butoanelor manuale de control

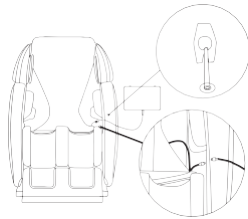

Așază suportul fix de control al mâinii pe șurubul cotierei stângi și atașează partea de jos a suportului de control al mâinii cu șurubul.
Localizează conexiunea pentru controlul mâinii stângi de pe perna șezutului, conectează dopul comenzii manuale la conexiunea de pe perna șezutului și strânge-o.

Plasați controllerul de mână pe suportul de control al mâinii pentru a finaliza instalarea controllerului de mână.

Manual de instrucțiuni pentru utilizare Bluetooth


1. Bluetooth-ul este activat implicit imediat ce dispozitivul este pornit. Numele Bluetooth este: Fotoliu de masaj.
2. Activează Bluetooth-ul pe telefon, găsește dispozitivul Bluetooth potrivit și conectează-te pentru a asculta muzică.



Scurtături de tastatură / Specificații tehnice

Scurtături de tastatură / Specificații tehnice

Scurtături de tastatură/specificații de produs

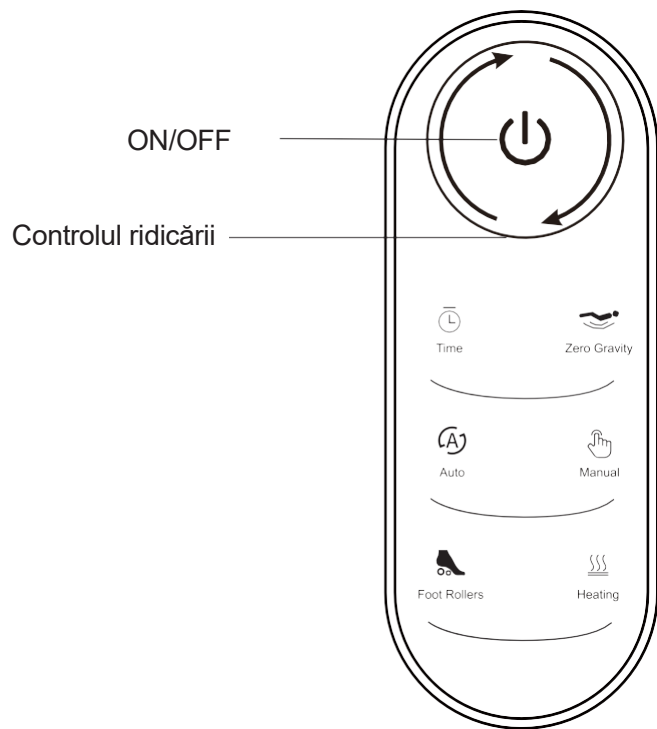


Afișaj de funcții


Afișaj de funcții

Cadru


Pentru a asigura cea mai bună experiență posibilă de masaj, se efectuează o detecție a formei corpului în 8 secunde când dispozitivul este pornit. Pentru o detecție precisă, vă rugăm să vă sprijiniți capul de tetieră. Utilizatorul poate apăsa butonul "Sus" și Apasă "Oprit" lângă "OK" pentru a face ajustări fine manuale.

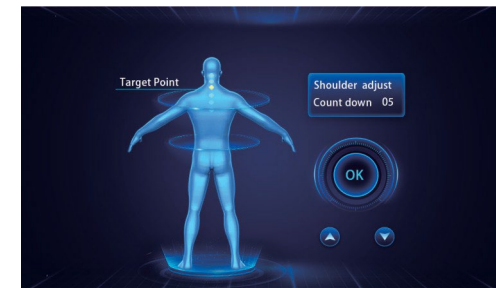

Apasă butonul din meniul și apasă pe "Master Smart Selection". Mod automat. Selectează programul automat corespunzător. (Sunt disponibile 9 moduri, inclusiv modul de somn, masaj la gât și umeri, stretching thailandez, masaj lombar, masaj intensiv, modul senior, modelarea siluetei, relaxare și recuperare post-antrenament.)

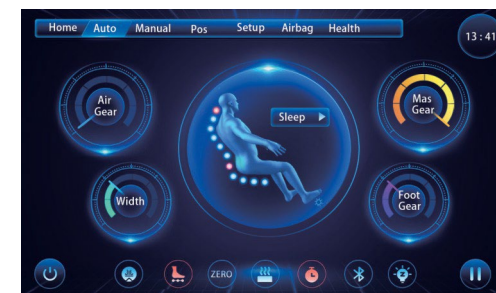

Apasă butonul Meniu și apasă butonul Home. Conținutul paginii principale: setări de pagină, setări de pornire și oprire, setări de pauză.

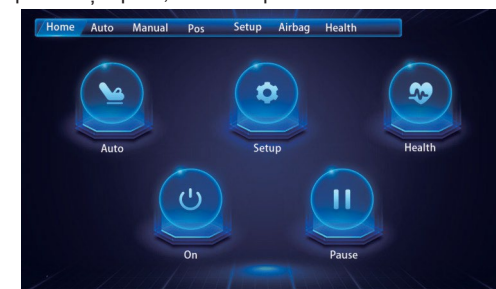



Afișaj de funcții

Afișaj de funcții

Tipul de masaj

Apasă butonul Meniu și apasă butonul Manual. (Un total de 20 de tehnici din care poți alege)


Mod manual – Tehnică: Selectați tehnica de masaj potrivită.



Apasă butonul de meniu: Apasă butonul de mișcare în sus. Mod manual → tehnică: Selectați tehnica de masaj potrivită. (20 de tehnici din care poți alege, inclusiv frământat, bătăi, bătut, shiatsu, frământat + ciocănit, frământat + frământat și frământat + bătăi etc.)



Apasă butonul Meniu: Apasă butonul de jos Mutare. Mod manual → tehnică: Selectați tehnica de masaj potrivită. (20 de tehnici din care poți alege, inclusiv frământat, bătăi, bătut, shiatsu, frământat + ciocănit, frământat + frământat și frământat + bătăi etc.)

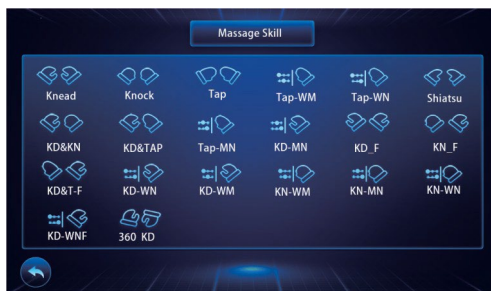

Afișaj de funcții

Afișaj de funcții



Poziția scaunului

Apasă butonul Meniu: Apasă butonul pentru poziția scaunului. Mod de reglare: 1. Ajustarea înălțimii spătarului, 2. Ajustarea înălțimii pentru picioare, 3. Program automat de lipsă de greutate.



Apasă butonul Meniu: Apasă butonul Setări. Mod de setare: 1. Comutare a limbii (engleză), 2. Conexiune Bluetooth, 3. Control vocal AI



Apasă butonul de meniu: Apasă butonul airbag. Modul airbag: poți porni sau dezactiva airbag-ul corespunzător (intensitatea este reglabilă). Poți, de asemenea, să activezi sau să dezactivezi funcția de masaj la picioare și funcția de încălzire.

