


Manual de instrucțiuni MA2601 MA2604

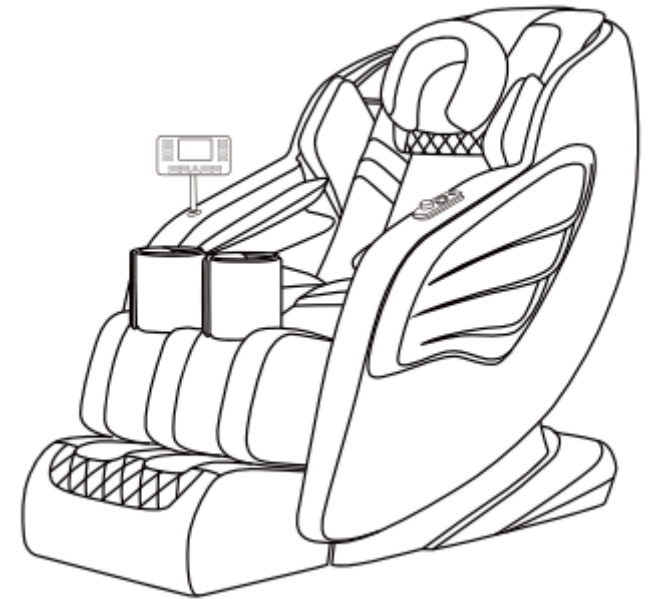

CONȚINUT

Vă rugăm să citiți și să urmați toate instrucțiunile de siguranță și funcționare enumerate în acest manual de utilizare înainte de utilizare. Precauțiile de bază trebuie întotdeauna respectate în timpul funcționării.

Pregătire și instrucțiuni înainte de utilizare	2
Structura produsului	3
Manual de instrucțiuni al controlerului	4
Instrucțiuni de funcționare	5-6
Ghid de scurtături de tastatură	7
Instrucțiuni pentru utilizarea Bluetooth-ului	8
Înainte de utilizare	9
Măsuri de siguranță	10-11
Întreținerea produsului	12
Specificațiile tehnice ale produsului	13

Compania noastră își rezervă dreptul de a îmbunătăți produsul și manualul acestuia fără notificare prealabilă. Aspectul produsului poate diferi de produsul real.


Acest manual a fost verificat cu atenție, dar greșelile tipografice sau neînțelegerile din conținut nu pot fi excluse. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru l-ar putea cauza.

10 Specificații tehnice ale produsului

Descrierea articolului	Descrierea specificației
Numele produsului	Scaun de masaj
Model	MA2601 MA2604
Tensiune nominală	220V
Frecvență nominală	50-60Hz
Putere nominală	120W
Greutate	Greutate netă: 55kg, Greutate brută: 65kg
Origine	China

01 Pregătire și instrucțiuni înainte de utilizare

1.Deschide ambalajul și scoate accesoriile.

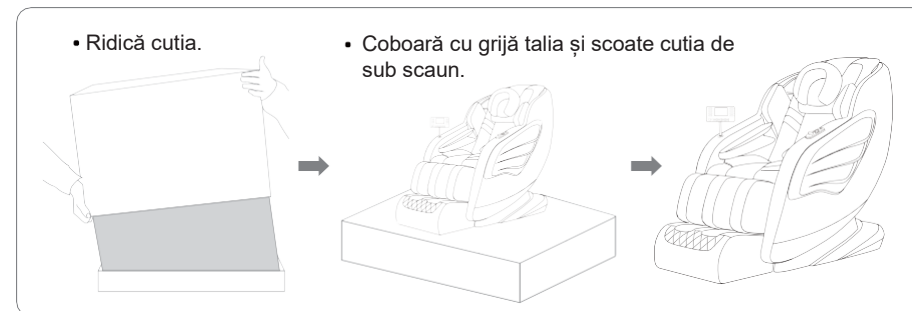

1. Scoate banda de ambalare din cutia exterioră a scaunului de masaj, ridică cutia exterioră și scoate-o.

2. Scoate accesoriile și pune-le deoparte pentru utilizare ulterioară.

2.2. Montarea scaunului de masaj

* Ridică cu grijă întregul fotoliu de masaj din ambalaj și plasează-l într-un loc potrivit din casă.



* Evitați expunerea fotoliului la lumina directă a soarelui sau la încălzitoare, deoarece acest lucru poate provoca decolorarea sau întărirea materialului.

* Pentru a preveni deteriorarea podelei și a reduce zgomotul, pune o cârpă sau alt material sub scaunul de masaj.


* Asigură-te că nu există obstacole în fața sau în spatele scaunului de masaj (lasă o distanță de peste 30 cm în spatele spătarului).

* Evită să plasezi fotoliul în zone umede sau inegale.



* Pentru a evita interferențele semnalului, menține scaunul de masaj la cel puțin 1 metru distanță de televizoare, radiouri și alte dispozitive.

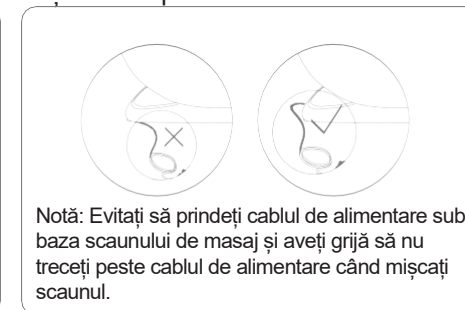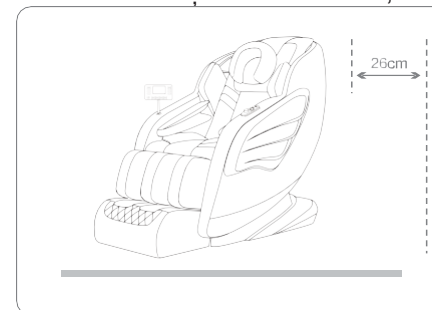

02 Structura produsului

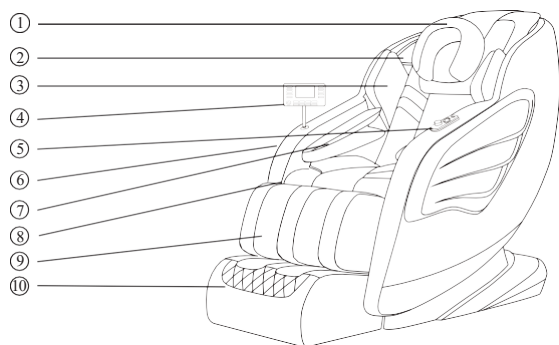


Spătarul scaunului de masaj

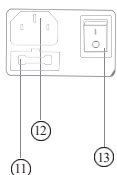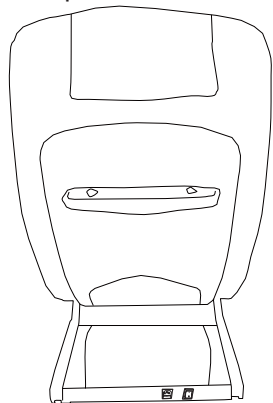

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Perna | 6. Cotiera | 11. Siguranța |
| 2. Capac difuzor | 7. Perne brațe | 12. Priza de alimentare |
| 3. Perne umeri | 8. Perne genunchi | 13. Pornit/Oprit |
| 4. Telecomandă | 9. Peme picioare | |
| 5. Tasta scurtatura | 10. Rola masaj picioare | |

Cum să miști scaunul de masaj

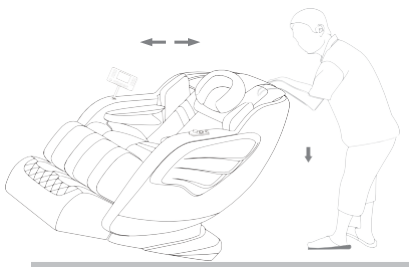


1. Ține spătarul cu ambele mâini, așa cum se vede în imaginea din stânga, și înclină scaunul înapoi cu aproximativ 30°.
2. Împinge ușor scaunul de masaj înainte sau înapoi folosind roțile până când acesta ajunge în poziția dorită. Atunci las-o baltă.



Atenție

*Nu mișcați scaunul de masaj în timp ce cineva îl folosește.
*Când muți scaunul de masaj, podeaua poate fi deteriorată. Se recomandă să pui o pernă sub fotoliu.*Pentru a evita căderea, ține scaunul de masaj în timp ce te miști.*Asigură-te că suportul pentru picioare este complet retras pentru a preveni accidentările când muți scaunul de masaj.

09 Întreținerea produsului

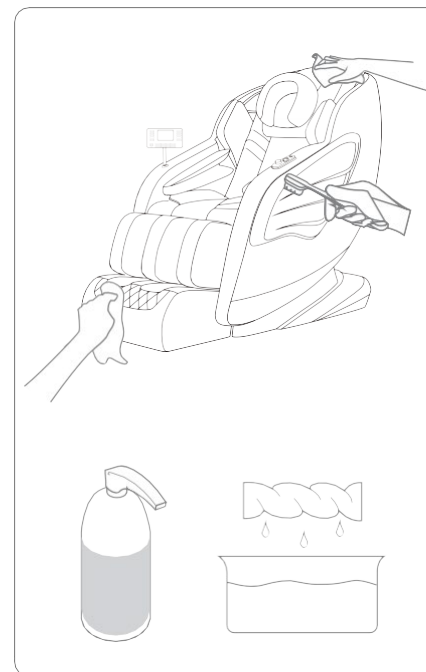


Curățenie

1. Nu folosiți lână de oțel, detergenți abrazivi sau lichide corozive (cum ar fi benzină sau acetona) pentru a curăța produsul.
2. Deconectează-l de la priză.
3. Folosește o cârpă uscată pentru a curăța scaunul de masaj, telecomanda și cablul de alimentare.
4. Nu folosi șervețele umede sau detergenți.

Depozitare

1. Deconectează-l de la priză.
2. Păstrează acest produs într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina soarelui.
3. Nu pune obiecte grele pe acest produs.

Dacă husa este deteriorată sau apare o problemă mecanică, opriți utilizarea produsului și consultați un tehnician.

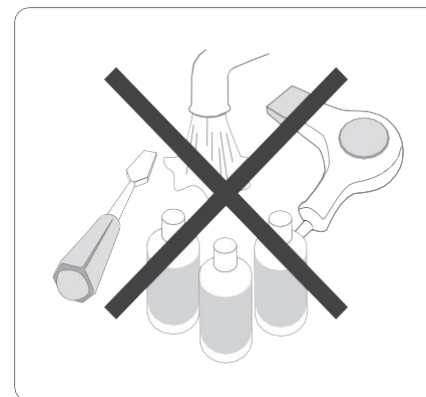



- Acest produs nu trebuie folosit de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau de persoane fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt sub supravegherea sau îndrumarea unei persoane responsabile care să asigure siguranța lor în utilizarea acestui produs.
 - Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu sunt expuși la acest lucru Joacă cu scaunul de masaj.
 - Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu componente provenite de la producător sau departamentul de mentenanță.
 - Nu folosiți acest dispozitiv cu o tensiune care să nu îndeplinească nivelul specificat Standarde pentru acest dispozitiv.
 - Acest produs trebuie folosit cu o priză cu trei pini împământată și ar trebui să aibă un dispozitiv de împământare fiabil.
 - Capacul, fie el din piele sau material textil, trebuie înlocuit imediat dacă este deteriorat.
- Nu folosiți dispozitivul pentru a evita rănirea.
- Nu lăsați telecomanda să se umezească sau să fie umedă pentru a evita defecțiunile.

Condiții anormale și metode de manipulare


Scenarii posibile

Metode de tratament

Scenarii posibile	Metode de tratament
Zgomot în timpul funcționării.	Zgomotul produs rezultă din proiectarea structurală și nu interferează cu funcționarea dispozitivului. Verifică dacă priza este conectată corect sau că există o sursă de alimentare. Verifică dacă butonul de pornire al scaunului de masaj este în poziția "I". Verifică dacă cablul de alimentare este deteriorat. Verifică dacă siguranța este deteriorată și înlocuiește-o dacă este necesar.
Scaunul de masaj nu poate fi folosit nici măcar când priza de alimentare este conectată.	Verifică dacă există resturi în spătar sau în tetieră. Verifică dacă cablul de conexiune este slăbit.
Spătarul nu poate fi ajustat liber.	Dacă temperatura scaunului de masaj devine prea ridicată după o utilizare prelungită, acesta va trece automat în modul de protecție a temperaturii. Te rugăm să oprești dispozitivul și să pui pauză pentru 30 până la 50 de minute pentru a permite aparatului să se răcească intern.
În timpul funcționării, controlerul este operațional, dar scaunul de masaj nu răspunde	Când funcția de temporizator automat este activată și timpul setat expiră, vă rugăm să apăsați din nou butonul pentru a relua operațiunea.
În timpul funcționării, controlerul nu funcționează și scaunul de masaj încetează să funcționeze.	

Dacă apare o situație anormală, pentru a evita accidentele, vă rugăm să încetați să folosiți scaunul de masaj și să-l deconectați. Dacă următoarele metode de tratament nu funcționează Efectu, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

Intervale funcționale ale telecomenzii: (În fața telecomenzii)

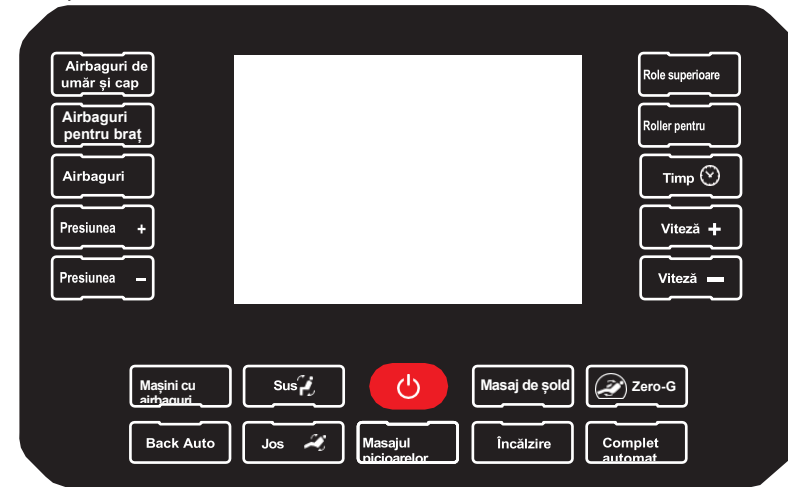

04 Instrucțiuni de funcționare

Descrierea funcțiilor inferioare

1. Putere: În modul standby, apasă acest buton pentru a activa ecranul controllerului. În acest moment, poți alege programul de masaj potrivit pentru a începe masajul.
2. Airbaguri de umăr/cap: Activează/dezactivează funcția de masaj pentru airbagurile de umăr și cap.
3. Airbaguri pentru braț/lateral pentru șold: Activează/dezactivează funcția de masaj pentru airbag-urile pentru brațe și laterale ale șoldului.
4. Airbaguri pentru picioare: Activează/dezactivează funcția de masaj pentru airbag-urile pentru picioare.
5. Air Pressure+: Apăsați acest buton pentru a crește intensitatea airbagurilor cu 3 niveluri.
6. Presiunea aerului-: Apăsați acest buton pentru a reduce intensitatea airbag-urilor cu 3 niveluri.
7. Airbag-uri Auto: Activează/dezactivează întregul masaj al airbag-ului.
8. Back Auto: Activează/dezactivează modul automat de înapoi (în același timp, modurile de frământare și Tuina vor fi activate sau dezactivate).
9. SUS: Apasă prea mult acest buton, spătarul se ridică și gamba se scufundă. Lasă butonul, spătarul și gamba se opresc.
10. Jos: Dacă apeși prea mult acest buton, spătarul se va scufunda și gamba se vor ridica. Lasă butonul, spătarul și gamba se opresc.
11. Masaj la picioare: Activează/dezactivează rolele pentru picioare. Există 3 niveluri reglabile.
12. Masajul șoldului: Activează/dezactivează masajul șoldurilor.
13. Încălzirea: Activează/dezactivează temperatura ridicată a spatelui și a picioarelor.
14. Zero-G: Cu un singur click, funcția de gravitație zero se activează cu unghiul maxim de gravitație zero. Funcția zero-G înseamnă că întregul scaun este într-o poziție orizontală.
15. Complet automat: Relaxare (Bucurie / Întindere / Puternic / Somn / răcoritoare).

08 Instrucțiuni de siguranță



Priza de

Înainte de a folosi dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile.

Acest foliu de masaj trebuie folosit cu o priză disponibilă pentru avertizare corespunde. Împământarea necorespunzătoare poate duce la un șoc electric. Nu modifica tu înțeles ștecherul; Nu face asta Verifică întotdeauna de un tehnician calificat. Când manipulați produse electrice, vă rugăm să respectați măsurile de siguranță de bază pentru a evita riscuri precum șocuri electrice, arsuri, incendii sau răni, inclusiv următoarele.


- Folosește produsul doar cu o priză care se potrivește cu priza.
- Asigură-te că priza este complet conectată la priză pentru a reduce riscul de un scurtcircuit.
- Întotdeauna deconectează scaunul de la priză după utilizare sau înainte de curățare.
- Nu folosiți acest produs la temperaturi ridicate.
- Nu depozitați sau folosiți acest produs în aer liber sau în lumina directă a soarelui.
- În cazul unei pene bruște de curent în timpul utilizării, opriți imediat dispozitivul și deconectați pentru a preveni deteriorarea când se restabilește curentul.
- Nu folosiți scaunul de masaj dacă cablul de alimentare este ud sau deteriorat.
- Nu afundați sau deconectați cu mâinile ude pentru a evita accidentele.
- Supraveghează copiii, persoanele cu dizabilități sau persoanele cu dizabilități limitate. Mobilitatea când sunt aproape sau folosesc scaunul de masaj.
- Folosiți produsul doar pentru scopurile descrise în manual.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt furnizate de companie.
- Nu te ridica, nu te așeza și nu sări pe suportul pentru picioare pentru a evita accidentările.
- Nu încerca să te așezi pe cotieră sau pe spătar, deoarece acest lucru va cauza Poate face scaunul să se răstoarne și să provoace accidente.
- Nu adormi în timpul masajului.
- Curăță scaunul de masaj regulat și evită inserarea obiecte în crăpăturile sale.
- Nu mișcați scaunul de masaj trăgând de cablul de alimentare.
- Verifică dacă există crăpături anormale sau daune la tapițerie sau spătar al scaunului înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți produsul dacă apar anomalii și contactați imediat serviciul clienți al furnizorului.
- Acest produs este destinat doar uzului casnic.
- Consultați un medic dacă nu sunteți sigur de folosirea scaunului de masaj.
- Consultați un medic înainte de a folosi produsul dacă aveți tumori maligne, boli de inimă, sunteți însărcinată, postpartum sau aveți menstruație, aveți nevoie de o perioadă liniștită de recuperare, urmați un tratament, aveți probleme de spate, vertebre cervicale anormale sau deformări.
- Întrerupeți imediat utilizarea dacă apare durere în timpul utilizării, și Solicitați ajutor medical în caz de accidentări în timpul utilizării.
- Nu masați pielea inflamată sau umflată.
- Acest produs oferă un masaj confortabil pentru uz casnic și nu înlocuiește niciunul Terapie profesională prin masaj.
- Se recomandă utilizarea scaunului de masaj până la 30 de minute pe zi, cu cel mult 20 de minute pe zonă, pentru a evita efectele negative ale utilizării excesive și pentru a preveni supraîncălzirea, care poate scurta durata de viață a produsului.
- Nu folosiți acest produs în aerosoli sau în medii oxigenate.
- Nu este potrivit pentru copiii sub 12 ani.

07 Înainte de utilizare



Atenție

- Dacă ajustezi componenta de masaj la picioare în sus, nu te așezi în scaunul de masaj, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul și poate face scaunul să se răstoarne, ceea ce poate duce la accidente și răniri.
- Înainte să te așezi pe scaunul de masaj, asigură-te că spătarul este în poziție verticală. După ce te așezi, ajustează unghiul de înclinare în funcție de preferințele personale.
- Nu plasați mâinile sau obiectele în spațiile dintre șa și spătar sau între șa și componenta de masaj pentru picioare pentru a evita accidentele și rănirile.
- Când ajustezi unghiul, asigură-te că nu există obstacole sau animale mici în spatele spătarului sau sub și în fața componentei de masaj pentru picioare.

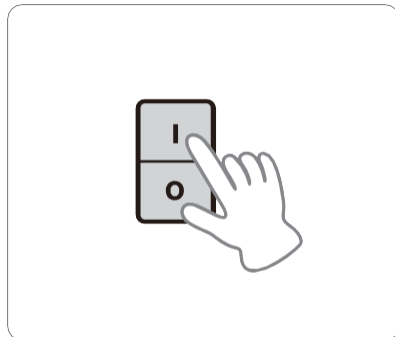

Conectează cablul de alimentare al scaunului de masaj

- Conectează cablul de alimentare
- Pornește butonul de pornire, care se află pe partea dreaptă a scaunului de masaj.
- Dacă scaunul de masaj nu este folosit mult timp, asigură-te că întrerupătorul de pornire este setat pe poziția "O" pentru a-i prelungi durata de viață.
- Deconectează-l.
- Nu răsuci sau îndoi cablul de alimentare pentru a preveni ruperea.

Comutatorul este amplasat în spatele carcasei de control electronic.

16. Role superioară pentru spate: Apasă o dată pentru a începe masajul în sensul acelor de ceasornic, iar ecranul afișează A1. După ce masajul a fost activat, apăsați de două ori în sens invers acelor de ceasornic pentru o rotație cu ecranul arătând A2. După ce masajul este activat, apăsați de trei ori pentru a comuta între sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic, ecranul afișând A3. După ce masajul este activat, apăsați de patru ori pentru a afișa A0 pe ecran, ceea ce va dezactiva toate funcțiile de masaj pentru umărul și partea superioară a spatelui.

17. Roller pentru partea inferioară a spatelui: Apasă o dată pentru a începe masajul în sensul acelor de ceasornic, cu ecranul afișând B1. După ce masajul a fost activat, apăsați de două ori pentru o rotație în sens invers acelor de ceasornic, iar ecranul afișează B2. După ce masajul este activat, apăsați de trei ori pentru a comuta între sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic, ecranul afișând B3. După ce masajul a fost activat, apăsați de patru ori pentru a afișa B0 pe ecran, ceea ce va provoca toate dedesubturile

Funcțiile de masaj cu rolele de spate pot fi dezactivate.


18. Timp: Apasă butonul de start pentru a seta setarea la: 15 minute, 20 de minute, 25 de minute, 30 de minute, funcționare ciclu de oprire.

19. Viteză+: Apasă butonul pentru a ajusta viteza scuterului

Mișcare, în total 3 niveluri.

20. Viteză-: Apasă butonul pentru a reduce viteza de mișcare a scuterului, în total 3 niveluri.

05 Manualul de scurtături

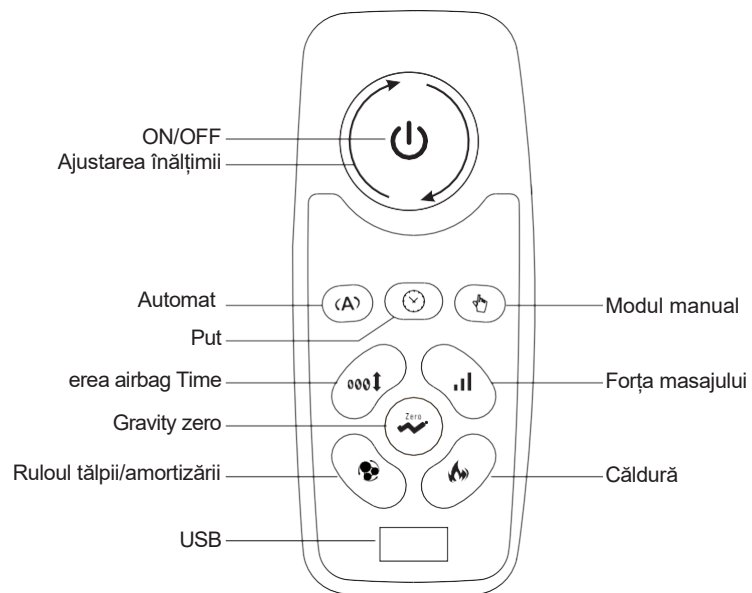

06 Manual de instrucțiuni pentru utilizare Bluetooth

1. Bluetooth-ul este activat implicit când dispozitivul este pornit, cu numele Bluetooth: (Fotoliu de masaj)
2. Pornește Bluetooth-ul pe telefon, găsește dispozitivul Bluetooth potrivit și conectează-te pentru a asculta muzică.